



NEOR

**Інструкція з використання
масажера портативного
ТМ "NEOR"**

**MODEL
PULSE Home 20GY**

Зміст

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	3
2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС	4
3. РОЗПАКУВАННЯ	5
4. ПІДГОТОВКА ДО КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ	6
5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ	6
6. ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	6
7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	7
8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ	7

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням приладу і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

1. Перед використанням переконайтеся, що корпус масажеру, зарядний пристрій та його насадки не мають видимих пошкоджень.
2. Не використовуйте прилад при болісних відчуттях або травмах (наприклад, грижі міжхребцевого диска, відкритій рані) в області ділянок тіла, що масажуються.
3. Не використовуйте прилад за наявності кардіостимулятора.
4. Категорично забороняється використовувати прилад для масажу серця.
5. Категорично забороняється використовувати прилад на опухлих, обпечених, запалених або травмованих ділянках шкіри та частинах тіла.
6. Не використовуйте прилад при рваних ранах, розширених капілярах, варикозі, вугрових висипах, куперозі, герпесі або інших захворюваннях шкіри.
7. Не використовуйте прилад для масажу голови.
8. Не використовуйте прилад для масажу обличчя (очей), гортані або інших особливо чутливих частин тіла.
9. Не використовуйте пристрій у зоні бікіні.
10. Не використовуйте пристрій під час сну.
11. Не використовуйте прилад на тваринах.
12. Не використовуйте прилад при прийомі медикаментів або алкоголю (ризик обмеженої сприйнятливості).
13. Перед використанням приладу проконсультуйтеся з лікарем, особливо:
 - за наявності будь-якого серйозного захворювання;
 - за наявності кардіостимулятора, імплантатів чи інших медичних пристроїв;
 - при тромбозах;
 - при діабеті;
 - за наявності болю невизначеного походження;
 - під час вагітності;
14. Пристрій призначений тільки для використання у побуті. Не використовуйте в комерційних цілях. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням.
15. Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
16. Не використовуйте прилад, якщо Ви знаходитесь у транспортному засобі.
17. Переконайтеся, що прилад не контактує з водою або іншими рідинами.
18. У жодному разі не намагайтеся брати прилад до рук, якщо він упав у воду.
19. Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості до джерел тепла або відкритого полум'я.
20. Не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати прилад. За допомогою зверніться до авторизованого сервісного центру.
21. Перед тим як зняти, встановити або поправити насадку масажера, переконайтеся, що прилад вимкнений.
22. Перш ніж увімкнути пристрій, переконайтеся, що насадка встановлена правильно.
23. Використовуйте тільки насадки, що йдуть в комплекті з виробом.
24. Не залишайте пристрій без нагляду, коли він працює. Необхідний ретельний нагляд, якщо пристрій використовується дітьми або поряд із ними.
25. Не використовуйте безперервно більше однієї години. Дайте пристрою відпочити протягом 30 хвилин перед наступним використанням.

26. Не залишайте дітей без нагляду поряд з масажером та не дозволяйте їм гратися з приладом та насадками до нього.
27. Діти повинні користуватися приладом тільки під наглядом дорослих.
28. Не накривайте працюючий прилад ковдрою, подушкою тощо.
29. Не використовуйте прилад поблизу ємностей з бензином або іншими займистими речовинами.
30. Використовуйте прилад тільки в сухих приміщеннях (наприклад, ніколи не використовуйте його у ванній або сауні).
31. Використовуйте прилад лише з елементами, які входять до комплекту постачання.
32. Прилад та насадки слід захищати від ударів, пилу, хімікатів, сильних коливань температури, електромагнітних полів. Не варто застосовувати прилад поблизу джерел тепла (печей, радіаторів опалення).
33. Ніколи не залишайте прилад увімкненим або підключеним до зарядного пристрою без нагляду.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС




Мал. 1

Зовнішній вигляд (Мал. 1)



Мал. 2

Панель управління пристроєм (Малюнок 2)

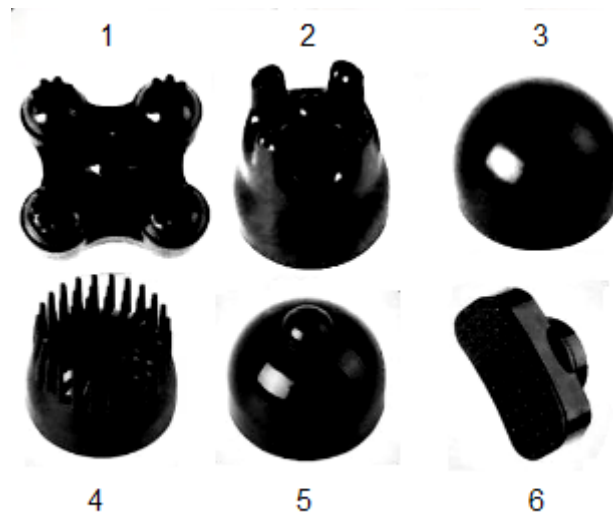

Мал. 3

Насадки (Малюнок 3)

1. Чотирикутна масажна насадка: відповідає за масаж практично всіх частин тіла
2. Насадка "П'ять пальців": забезпечує точний масаж, багатостороннє позиціонування всієї системи акупунктурних точок тіла.
3. Кругла масажна насадка: підходить для масажу майже всіх частин тіла.
4. Голчаста насадка: підходить для стимуляції конкретних ділянок, для натискання на долоні, стопи, ноги та інші частини тіла.
5. Насадка імітації масажу відчуттям пальця: підходить для масажу конкретних ділянок з відчуттям натискання пальцями.
6. U-подібна насадка: підходить для масажу плечей і ніг.

3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при температурі нижче 0°C необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
2. Перевірте цілісність масажеру та його комплектуючих, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

4. ПІДГОТОВКА ДО КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

Перед першим використанням будь ласка, зарядіть батарею протягом 2 годин. Вставте в роз'єм живлення шнур живлення, що йде в комплекті поставки, під'єднайте блок живлення до мережі. На блоці живлення загориться лампочка червоного кольору, це сигналізує про низький рівень заряду. Коли акумулятор буде заряджено, лампочка буде світитися зеленим кольором.

Заміна масажної насадки

Вимкніть масажер, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення. Повертаючи масажну насадку проти годинникової стрілки, встановіть будь-яку масажну насадку, яка йде в комплекті, а за годинниковою стрілкою встановіть поточну масажну насадку.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Від'єднайте шнур живлення від пристрою. Натисніть кнопку Ввімкнення/Вимкнення. Будьте уважні масажер відразу почне роботу, тому слід міцно тримати його в руках. На дисплеї з'явиться показник часу, який не регулюється і є сталим. Масажер для м'язів обладнано автоматичною системою вимкнення. Це означає, що через 15 хв. інтенсивної роботи масажеру, він автоматично переходить в режим очікування.

Рівні інтенсивності масажу

Пристрій має десять рівнів інтенсивності масажу. Для зміни інтенсивності масажу користуйтеся кнопками збільшення/зменшення швидкості. Під час натискання на дані кнопки на дисплеї буде відображатися блимаючий показник від 1 (мінімальна швидкість) до 10 (максимальна швидкість).

Режими масажу

Пристрій має дванадцять режимів масажу. Для вибору режиму натисніть кнопку перемикач режимів «АУТО». Натискаючи на кнопку перемикач режимів на дисплеї відображається блимаючий показник від 1 до 12

Вказівка

Процедура масажу завжди має бути приємною. Цілком можливе виникнення невеликих гематом, що є позитивним терапевтичним ефектом, оскільки застосування масажера для м'язів цілеспрямовано стимулює кровообіг. Може також спостерігатися почервоніння окремих ділянок шкіри. При сильному подразненні шкіри припиніть використання масажера для м'язів і проконсультуйтеся з лікарем. Залежно від ступеня виразності напруги/затискання у відповідній області (ноги, плечі, руки та спина), рекомендована тривалість застосування прибіл.10-15 хв.

Слідкуйте, щоб масажер для м'язів не рухався безпосередньо по кістках.

6. ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Завжди вимикайте прилад перед очищенням.

1. Під час чищення приладу використовуйте лише злегка зволожену серветку.

2. Очищайте прилад лише вказаним способом. Не допускайте потрапляння рідин у прилад.
 3. Використовуйте прилад знову тільки після того, як він повністю висохне.
 4. Не мийте прилад і насадки до нього у посудомийній машині.
 5. Не використовуйте абразивні засоби для чищення або жорсткі щітки.
- Якщо масажер для м'язів не використовується тривалий час, рекомендується зберігати його в сухому місці в оригінальній упаковці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети.

7. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Строк служби виробу становить 2 роки.

Гарантійний термін вказаний в гарантійному талоні.

Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Користування приладом не за призначенням;
- Випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- Пошкодження в результаті стихійного лиха;
- Пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- прилад, призначений для особистого побутового використання був задіяний у підприємницькій діяльності / масово експлуатувався та / або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до уповноваженого сервісного центру.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

Назва приладу	Масажер портативний NEOR PULSE
Модель приладу	HOME 20GY
Матеріал	Металевий сплав, поліпропілен, ABS пластик
Кількість швидкостей	10
Тип керування	Електронний
Номінальна напруга	24 В

Тип керування	Сенсорний
Номінальна потужність	24 Вт
Час заряду	2-4 години
Ємність акумулятора	2000 мАг
Час роботи	близько 1 години
Розмір виробу	43*12*7 см
Розмір упаковки	48*14,5*9,5 см
Вага нетто/брутто	1,1/1,3 кг
Строк служби виробу	2 роки
Комплект постачання	Масажер портативний NEOR PULSE, 6 насадок, блок живлення, гарантійний лист

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Dongguan Super Electric Technology Co., Limited No. 601-602, Unit 1, No. 8 of Commercial Road, Xiping Community, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, Китай