



**NEOR**

**Інструкція з використання  
компресійного масажера  
для ніг NEOR LEGSWELL**

**MODEL F40 BK**

## Зміст

1. Заходи безпеки та застереження.....	3
2. Зовнішній вигляд та опис.....	5
3. Розпаковування.....	6
4. Перше використання.....	6
5. Експлуатація.....	7
6. Очищення.....	8
7. Зберігання.....	9
8. Гарантійне обслуговування.....	9
9. Технічні характеристики.....	9

## 1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням масажера, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

1. Будь ласка, використовуйте масажер не більше 30 хвилин, інакше це може викликати біль у м'язах.

2. Наступні користувачі повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням масажера якщо:

- встановлено кардіостимулятор або подібний імплантований медичний пристрій;
- страждає на захворювання серця;
- крихкими або пошкодженими кістками;
- пошкодженим хребтом;
- щойно переніс операцію;
- вагітна або після пологів;
- страждає на остеопороз;
- страждає на проблеми з кровообігом або тромбоз;
- страждає на шкірну інфекцію;
- отримує лікування або допоміжне лікування;
- з відхиленнями в кінцівках;
- страждає від спондильозу та травми хребта внаслідок нещасного випадку або хвороби.

3. Якщо є механічна чи електронна несправність, будь ласка не використовуйте масажер, а зверніться до місцевого продавця або сервісного центру.

4. Не використовуйте масажер у дуже вологих і високотемпературних приміщеннях і не використовуйте його біля предметів опалення (таких як електроопалення, печі, відкриті джерела вогню).

5. Будь ласка не використовуйте масажер у вологому середовищі, наприклад у ванній кімнаті або в місцях поблизу кранів або басейнів.

6. Будь ласка, не застосовуйте медичні або косметичні засоби (креми або лосьйони) до або під час використання масажера.

7. Не трусіть та не кидайте масажер.

8. Не використовуйте масажер за годину до або після їжі.

9. Не намотуйте шнур живлення навколо масажера.

10. Не ставьте на масажер і не ставте на нього важкі предмети.

11. Якщо масажер виходить з ладу, будь ласка, від'єднайте кабель живлення та негайно зверніться до сервісного центру.
12. Перед використанням масажеру переконайтеся, що напруга в розетці відповідає зазначеній в технічних характеристиках.
13. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
14. Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на масажер, шнур живлення та вилку.
15. Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте масажер поза приміщеннями.
16. Вимикаючи масажер з електричної мережі, не тягніть за шнур, треба тягнути за вилку мережевого шнура.
17. Не беріться за мережеву вилку або за корпус масажера мокрими або вологими руками.
18. Під час роботи не накривайте масажер різними конструкціями або одягом.
19. Перш ніж увімкнути масажер, перевірте чи штекер шнура живлення повністю вставлений в гніздо. Якщо він не повністю вставлений, це може викликати нагрівання або пожежу.
20. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
21. Не використовуйте масажер з пошкодженим шнуром живлення або вилкою.
22. Не кладіть масажер у воду чи інші рідини, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом.
23. Не підключайте масажер до розетки, що має пошкодження.
24. Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого масажера знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
25. Температура в приміщеннях, де використовується масажер, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.
26. Користувач не повинен залишати без нагляду увімкнений в мережу масажер, оскільки це може бути джерелом небезпеки.
27. Не залишайте дітей без нагляду поряд з масажером та не дозволяйте їм гратися з ним. Масажер та шнур живлення потрібно тримати в недосяжних



місцях для малолітніх дітей.

28. Забороняється самостійно ремонтувати масажер. Не розбирайте його самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння вимкніть його з електричної розетки та зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

29. До початку роботи масажера його необхідно поставити на рівну суху робочу поверхню.


30. Захищайте кабель живлення від фізичного чи механічного пошкодження. Не згинайте і не розтягуйте кабель із застосуванням фізичної сили. Не притискайте його важкими предметами.

## 2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС

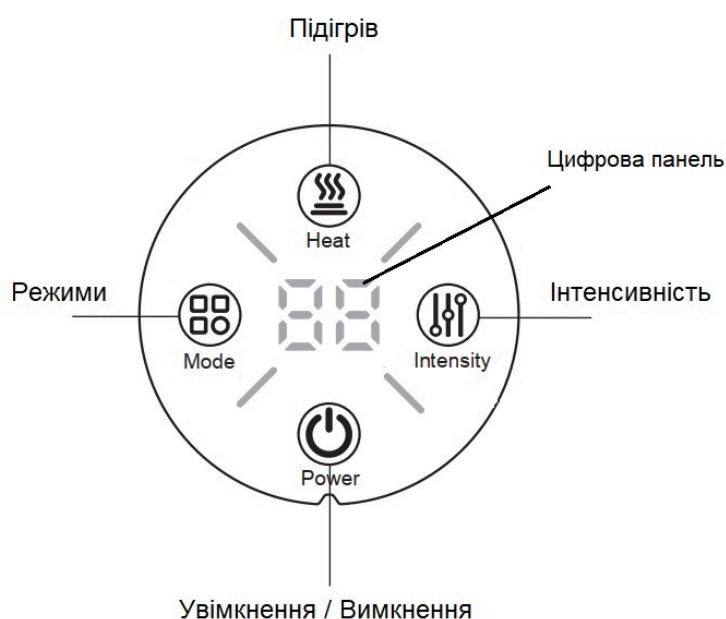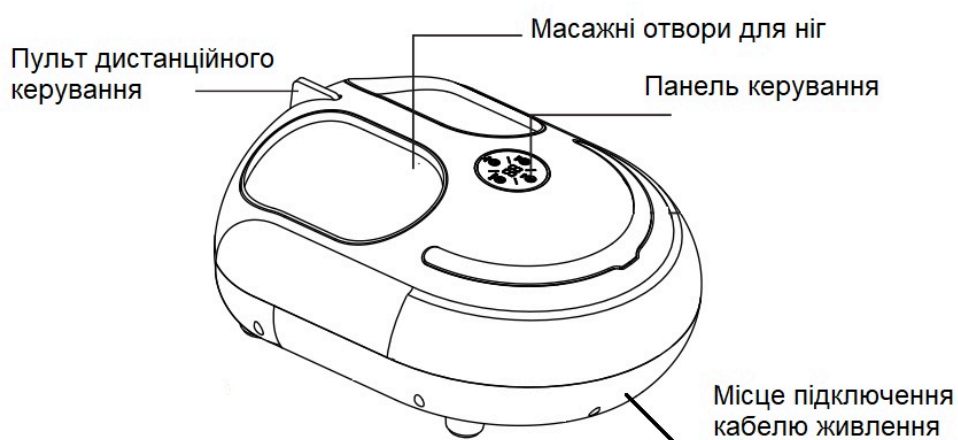

Пульт ДК:

- 1) Кнопка увімкнення /вимкнення.
- 2) Кнопка увімкнення / вимкнення вібраційного масажу.
- 3) Кнопка увімкнення / вимкнення інфрачервоних ламп.
- 4) Кнопка регулювання швидкості масажу.
- 5) Кнопка вибору режиму масажу.
- 6) Кнопка встановлення часу масажу.

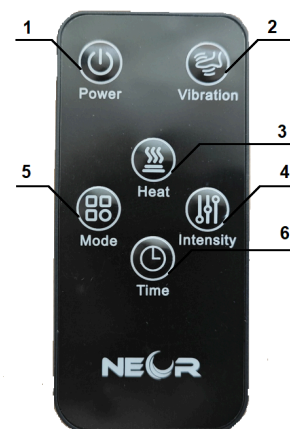

### 3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

1. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
2. Перевірте цілісність пристрою та кабелю живлення, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
3. Перед вмиканням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

### 4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням:

1. Розмотайте кабель живлення на всю довжину.
2. Встановіть прилад на рівну тверду горизонтальну поверхню.
3. Під'єднайте кабель живлення до масажеру.

## 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ



**НЕ ПРОСОВУЙТЕ РУКИ  
В ОТВОРИ**



Після встановлення масажера та під'єднання його до мережі, пролунає звуковий сигнал, просуньте ноги в отвори як показано на малюнку. Не ставайте всією вагою на масажер.

**Робота з панеллю керування:** Натисніть кнопку включення для запуску масажера.



1. Кнопка увімкнення. Утримуйте 2 секунди для увімкнення чи вимкнення масажера, коротке натискання регулюють час роботи масажера

5-10-15-20-25-30. За замовчуванням встановлено 15 хвилини.

## 2. Режими: є чотири основні режими

- P1-P2-P3-P4.
- P1 передній ролик + airbag.
- P2 реверс ролик + airbag.
- P3 вперед і назад тільки валик.
- P4 тільки подушка безпеки.
- За замовчуванням встановлений режим P1.

## 3. Інтенсивність: є п'ять ступенів L1-L2-L3-L4-L5.

Інтенсивність регулює тиск airbag. За замовчуванням встановлений режим L1.

## 4. Підігрів: є три режими

- H1-H2-H0.
- H1 слабкий підігрів
- H2 сильний підігрів
- H0 без підігріву
- За замовчуванням встановлений режим H1.

Всі зміни будуть відображатись на цифровому дисплею.

## Робота з пультом ДК

Направляйте пульт дистанційного керування на масажер, для кращого контакту. Пульт ДК дублює роботу панелі керування, з відображенням всіх дій на дисплеї. Також на пульті знаходиться кнопка увімкнення вібрацій F0-F1. За замовчанням вібрація вимкнена F0.

## 6. ОЧИЩЕННЯ

1. Обов'язково від'єднайте прилад від мережі при очищенні.

2. Забороняється мокрими руками торкатися шнура живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.

3. Не занурюйте шнур живлення, вилку та корпус приладу у воду або іншу рідину, це може призвести до пошкодження приладу, пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.

4. Протріть корпус приладу злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.



## 7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Зберігайте пристрій у сухому місці при кімнатній температурі.
2. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
3. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

## 8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Гарантійний термін становить 1 рік.  
Строк служби виробу становить 3 роки

Після закінчення строку служби виробу виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням
- технічні зміни виробу
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями
- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами

## 9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСАЖЕРУ

Назва приладу	Компресійний масажер для ніг NEOR LEGSWELL
Модель приладу	F40 BK
Напруга живлення,В	220, 50 Гц

Максимальна потужність, Вт	40
Тип керування	Сенсорний/пульт ДК
Матеріал корпусу	ABS, Сталь
Габаритний розмір, см	39x32x18
Габаритний розмір пакування, см	43,4x34,5x19,7
Вага нетто/брутто, Кг	3,3/3,8
Комплект постачання	Масажер -1шт, пульт ДК - 1шт, гарантійна картка — 1шт, кабель живлення - 1шт

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO.,LTD

Адреса: No.2 Building. Mashantou Industrial Zone, Longshan Town, YongKang City, ZheJiang, China